


Внимание: хроническая венозная недостаточность! Как вернуть ногам здоровье?

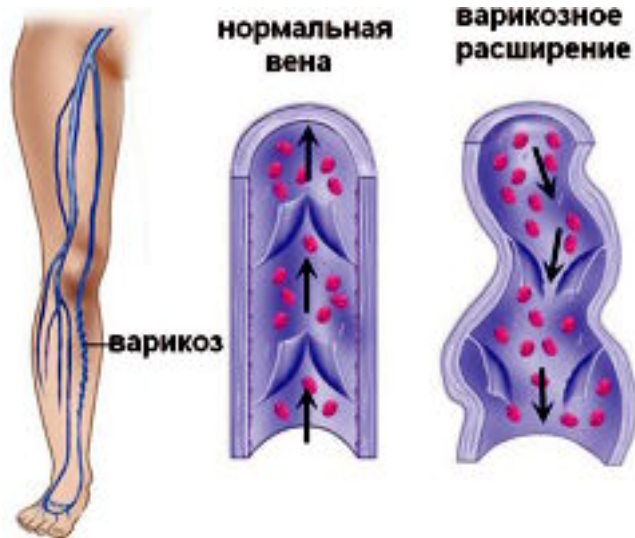

Летом хочется, чтобы солнце дарило коже свою горячую ласку. Однако бывает, человек не решается надеть короткую юбку или шорты из-за отекающих ног, расширенных вен и сосудистых «звездочек». Что же делать? Срочно лечить венозную недостаточность!

Все тело человека, словно сеть автодорог, пронизано кровеносными сосудами. По артериям кровь движется от сердца, обогащая ткани кислородом и питательными веществами, а по венам возвращается обратно. Сложнее всего приходится венам ног – ведь каждую секунду кровь должна подниматься, преодолевая силу тяжести. Если стенки

сосудов эластичные, а мышцы ног крепкие, все в порядке: сокращение мышц голени направляет ток крови вверх, а клапаны не позволяют ей снова спуститься по венам. Однако мышцы ног современного человека работают не слишком активно. Зачастую человек больше сидит или стоит, чем ходит и бежит. Да и стенки сосудов с возрастом теряют эластичность из-за отложения вредных веществ. И однажды может развиться серьезное расстройство – хроническая венозная недостаточность. По данным статистики, ХВН нижних конечностей с нарушением оттока крови имеется у каждого третьего (!) россиянина от 20 до 50 лет. Постепенно прогрессируя, болезнь способна приве-

сти к появлению глубоких язв, тромбозу (закупорке) сосудов и даже смертельно опасной тромбоэмболии легочной артерии.

И сидели, и стояли. Ой, как ноженьки устали...

Коварство венозной недостаточности заключается в том, что первые признаки болезни воспринимаются как нормальное проявление усталости ног к концу дня. Между тем отеки голеней, чувство тяжести и распирающего в икрах, возникающие, когда приходится долго сидеть или стоять, говорят о начальной стадии ХВН. Определенно должны насторожить ночные судороги в икроножных мышцах и появление на коже ног синих-красных «звездочек» – это расширенные сосуды. На этой стадии кровообращение уже значительно нарушено, особенно выражен застой в мелких капиллярах. От сильного давления на стенки жидкая часть крови проникает в окружающие ткани, усиливая отек. Приток свежей крови уменьшается с каждым днем. Кожа становится сухой, истончается, и даже малейшее ее повреждение приводит к появлению долго не заживающей трофической язвы. Кровь в венах настолько густеет, что образуются тромбы. Такой тромб мо-

жет полностью перекрыть ток крови в сосуде или, оторвавшись от стенки, закупорить легочную артерию с весьма печальными последствиями.

Болезнь можно остановить

Чтобы предотвратить опасные осложнения, начинать лечение ХВН нужно как можно раньше. Однако даже в запущенных случаях возможно справиться с болезнью без операции. Одним из основных средств, дающих возможность значительно улучшить состояние нижних конечностей, является магнитное поле. Оно способствует не только улучшению кровотока, но и заживлению трофических язв в полтора раза быстрее по сравнению с лечением без использования магнитотерапии. Важно, чтобы под действием магнитного поля оказалась вся площадь пораженного венозного русла. Кроме того, необходимо восстанавливать кровоток не только в поверхностных, но и глубоких венах голени. Такими возможностями обладает аппарат магнитотерапии АЛМАГ-02. Его излучатель способен охватывать большие поверхности, а магнитные импульсы проникают на глубину до 15 см.

Что дает применение АЛМАГ-02

АЛМАГ-02 обладает свойствами:

- улучшать венозный отток за счет улучшения кровообращения в капиллярах;
- снимать боль и отек;
- уменьшать вязкость крови и снижать вероятность образования тромбов;
- улучшать сократительную способность сосудистых стенок, позволяя добиться уменьшения размеров расширенных вен.
- усиливать действие лекарств и мазей, повышая качество лечения.

Таким образом, магнитотерапия АЛМАГом-02 при хронической венозной недостаточности способствует восстановлению тканей даже при ХВН с трофическими язвами. Однако не следует забрасывать лечение сразу после признаков улучшения. Для поддержания стойкого результата необходимы повторные курсы. АЛМАГ-02 создавался и использовался как аппарат для стационарной терапии, но сегодня доступен и для домашнего применения. Он дает возможность повысить качество жизни тех, кто сталкивается с заболеванием вен. Пусть походка будет легкой!



Где искать спасение от мигрени?

«Здравствуйте! Мне 43 года. Меня мучают сильные головные боли более десяти лет. Локализация боли разная: либо болят лоб и глаза (чаще утром), либо полголовы, либо болит вся голова. Несколько раз проходила комплексное лечение в больнице. Капельницы с сосудистыми препаратами не помогают. Таблетки пью постоянно, сначала помогают, но после 2-3 месяцев перестают помогать, и я меняю препарат. Посчитала – уже сменила 16 препаратов. Живу в постоянном страхе перед приступом. Приступы участились, теперь регулярно 1-2 раза в неделю, длятся несколько часов. После приступа я полностью нетрудоспособна. Могу ли я вылечиться? Очень мешает работать и жить».

Мелехова Т. А., Челябинск

Много людей страдает мигренью. Механизмы мигрени – почему она возникает и как ее лечить – до сих пор не раскрыты. При мигрени назначают лекарственные препараты различных групп: нестероидные противовоспалительные средства, анальгетики, антиконвульсанты, антидепрессанты. Постоянное употребление большого числа таблеток оказывает на организм далеко не лучшее влияние, а мигренозные приступы учащаются и усиливаются.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

При воздействии магнитного поля на область головы было выявлено обезболивающее, расслабляющее, успокаивающее действие. Такое магнитное воздействие на голову называется

транскраниальным. Оно не вызывает привыкания, легко переносится. Лечение проводится курсом по одной процедуре в день (20 минут перед сном) в течение 10–12 дней.

Транскраниальная магнитотерапия может помочь и при БЕССОННИЦЕ. Магнитный сеанс так расслабляет, что дает возможность человеку заснуть и спать долго и полноценно. А после лечебного курса может наблюдаться стойкое сохранение нормального сна без всяких дополнительных мер.

ЧЕМ ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ?

ДИАМАГ – новый портативный аппарат для транскраниальной терапии импульсным магнитным полем. Он предназначен для лечения заболеваний головного мозга. Аппарат состоит из блока



управления и излучателя «оголовье» – двух гибких излучающих линеек с индукторами. Для проведения процедуры достаточно надеть излучатель на голову, выбрать нужную программу и нажать кнопку «пуск». По окончании сеанса аппарат автоматически отключается.

В ДИАМАГе заложены лечебные программы, разработанные ведущими учеными России. ДИАМАГ – современный, надежный, качественный физиоаппарат в том числе и для домашнего применения. Воспользуйтесь его большими возможностями!

ДИАМАГ *



Показания к применению:

- Мигрень
- Бессонница
- Шейный остеохондроз
- Последствия инсульта
- Болезнь Паркинсона

*Алмаг-03

Приобретайте **Алмаг-01, Алмаг-02, Мавит** и другие медицинские аппараты Елатомского приборного завода в Магнитогорске

с 6 по 10 июля

сеть магазинов «Медтехника Интермед»

Октябрьская, 19,
Советская, 141,
Советская, 217,

К. Маркса, 161,
К. Маркса, 115,
К. Маркса, 63.

Внимание! Магазины «Медтехника Интермед» предоставляют товар в кредит*!

Телефон горячей линии завода 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СКИДКИ

Гарантия качества. Бесплатное сервисное обслуживание 2 года.

Заказ наложенным платежом: 391351, Рязанская область, Касимовский район, рабочий поселок Елатьма, ул. Янина, 25. ОАО «Елатомский приборный завод».

E-mail: admin@elamed.com www.elamed.com ОГРН 1026200861620

*Кредит предоставляется ООО «ХКФ Банк». Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ